


大腿前面支持型簡易座位保持用具

😊 パクッション

大腿部をしっかりサポートして、座位を安定させ、上半身の活動をうながします。

軽量でありながら、確かな安定性を提供できる「いす」を目指して

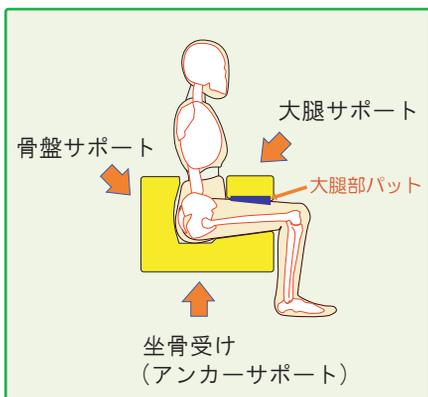

- ▷ 坐骨アンカーサポート
- ▷ 骨盤サポートに加え、
- ▷ 大腿サポート (大腿部パットで微調整が可能です)

が大腿前面から支持基底面（臀部～大腿後面）に対し、適度に圧をかけることで・・・

- 坐骨アンカーサポートの効果が得やすくなり、骨盤の前ずれが防止できます。
- 体幹や股関節の屈筋が働きやすくなります。



対象

頭部のコントロールは、ある程度有しているものの、座位が不安定な子どもを対象としています。

結果として、頭部や上半身のコントロールが行いやすくなります。

パクッションの特徴



軽い (ウレタンフォーム製品)
背面に持ち手をつけることで、持ち運びが楽にできます。

簡単 (面ファスナー脱着)
装着や調整が簡単・スムーズにできます。

安定・能力発揮
骨盤から下部体幹の安定性が得られるので、

- ① ブランコやスベリ台などの遊具を利用しやすくなります。
- ② レストランなどへの『お出かけツール』として利用することができます。

パクッション使用イメージ



サイズは、S・M・Lの3種類あります。

大腿サポートの設定に当たっては、専門の医師・セラピストにご相談ください。


製作にあたっては大腿サポートの適切な寸法の指示が必要となります。

パクッション

規格寸法表 (cm)

記号/サイズ	L	M	S
a	36	34	31
b	11.5	11.5	8.5
c	7	7	7
d	11.5	10.5	9

手作り品のため数値は精密ではありません。

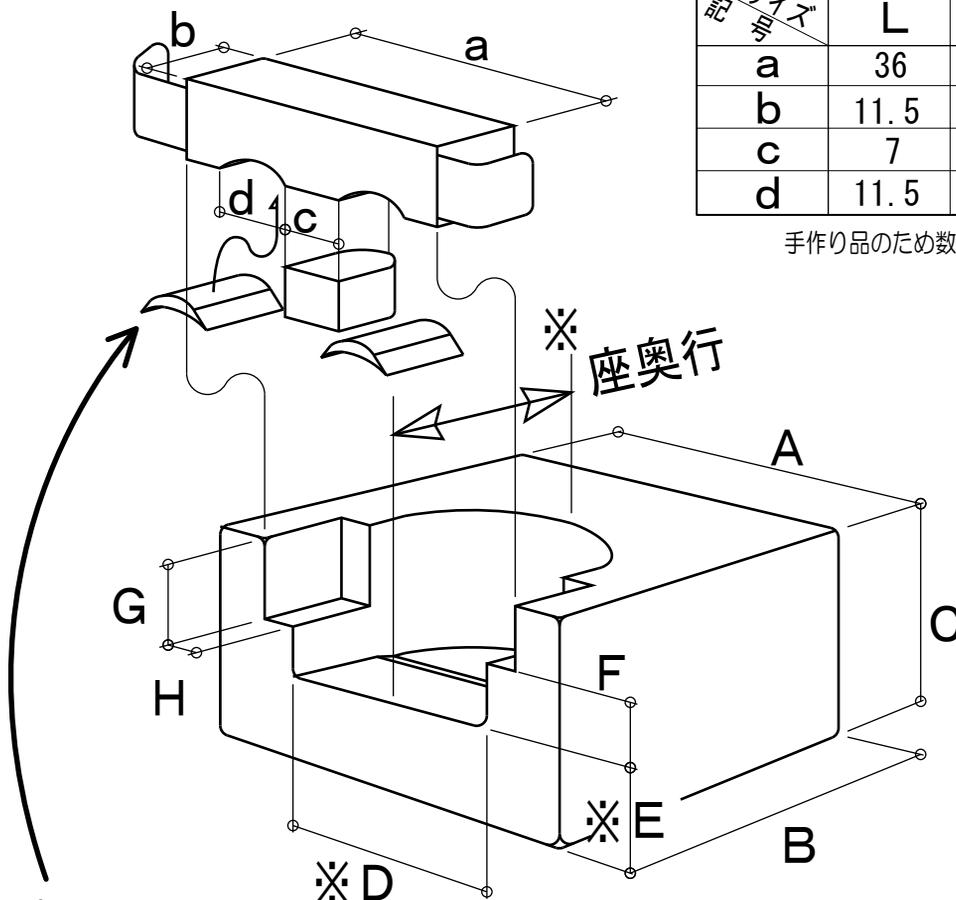

大腿部パット

大腿サポートと、大腿部の隙間を調整して密着度を上げることで、パクッションの効果をより高めます。

内部のウレタンを削ることで、厚さの調整が簡単に行えます。


(cm)

記号/サイズ	L	M	S
A	48	44	40
B	38	35	32
C	27	23	21
※D	30	28	25
※E	10	8	6
F	6	5	6
G	11	10	9
H	3.5	3.5	3.5
※座奥行	28	25	22

手作り品のため数値は精密ではありません。

※参考数値

D・E・座奥行 の寸法を指示してください。

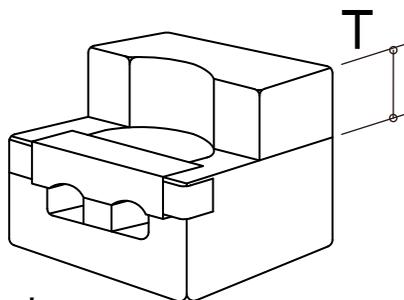

背パット

必要な高さ(T)を指示してください。

改善のため仕様等は予告なく変更する場合があります

『バリアフリーをものづくりから』

Lee製作室
http://lee-lee.jp/

〒910-0374

福井県坂井市丸岡町北横地 40-9

Tel. 0776-50-1105

Fax. 0776-50-1106

この製品は、福井県こども療育センターと共同で企画・開発しています